


# POLTRONE ORL



**DISPONIBILE IN 36 COLORI**  
Vedere colori a pag. 163  
Disponibile in 60 giorni

**PORTATA MAX 150 kg**

**27548 MADE IN ITALY**

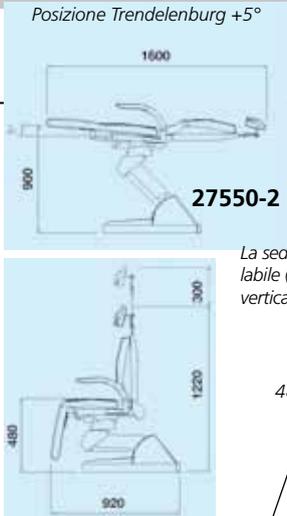

Lo schienale sincronizzato con il gambaie può essere regolato a 90° e inclinato fino a 190°

La seduta è regolabile (escursione verticale di 42 cm)

Larghezza 650 mm

Poggiabraccia ruotabili e amovibili in poliuretano espanso grigio chiaro

1.220 mm

Poggiapiedi su richiesta

Base della seduta in metallo pesante verniciato a polvere, con supporto di braccio pantografo girevole - rotazione di 85° a destra e a sinistra - bloccaggio tramite leva

**MADE IN ITALY**

**27551**

- 27545 NUOVA POLTRONA ORL OTO/PV con poggiatesta - colore su richiesta\*
  - 27548 NUOVA POLTRONA ORL OTO/PV con poggiatesta - verde Melbourne
  - 27549 NUOVA POLTRONA ORL OTO/PV con poggiatesta - azzurro Parigi
- Poltrona con seduta e schienale in Peltex. Meccanismo di sollevamento tramite attuatore elettrico con pedaliera. Schienale regolabile da -5° a +90° con pompa a gas. Ruota a 360° ed è equipaggiata con un meccanismo di bloccaggio rotazione. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz).

- 27550 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - colore a richiesta\*
  - 27551 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - blu Chicago
  - 27552 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - verde Toronto
- Per piccoli interventi ambulatoriali, movimentata da silenziosi attuatori elettrici azionati da pedaliera a joystick. Dotata di pulsante per tornare nella posizione originale. Rivestimento in skay, imbottitura in gomma indeformabile ad alta densità (50 kg/cm<sup>3</sup>). Seduta e gambaie in un pezzo unico. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz).


# RIUNITI ORL

Pompa aspirazione 34 lt/min con valvola di sicurezza per impedire fuoriuscite

**MADE IN ITALY**

Scalda specchietti laringe


Asta supporto per monitor

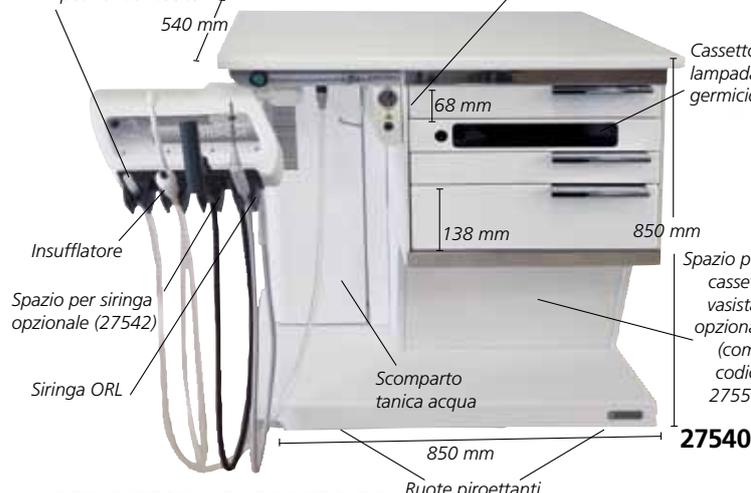

**27540**

- 27540 OTOPLUS - RIUNITO ORL
- Riunito per ORL su ruote gommate piroettanti, con piano di lavoro in laminato antigraffio con alzatina, 2 cassette piccoli e 1 grande con comodi scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida per la sterilizzazione degli strumenti. Silenziosa pompa per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione completo di potenziometro per lampada Clar/Storz, scalda specchietti laringe, compressore bi-cilindro a secco per insufflazioni tubariche e serbatoio dell'acqua distillata da 2 litri, con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva. Nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti sono alloggiati la cannula terminale per l'aspirazione, la cannula terminale per l'insufflazione e la siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene una temperatura costante di 37 °C). Alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz).


- 27539 OTOPLUS COMPLETO
- Come codice 27540 ma con cassette vasistas (codice 27541) e supporto endoscopio (codice 27543) inclusi.

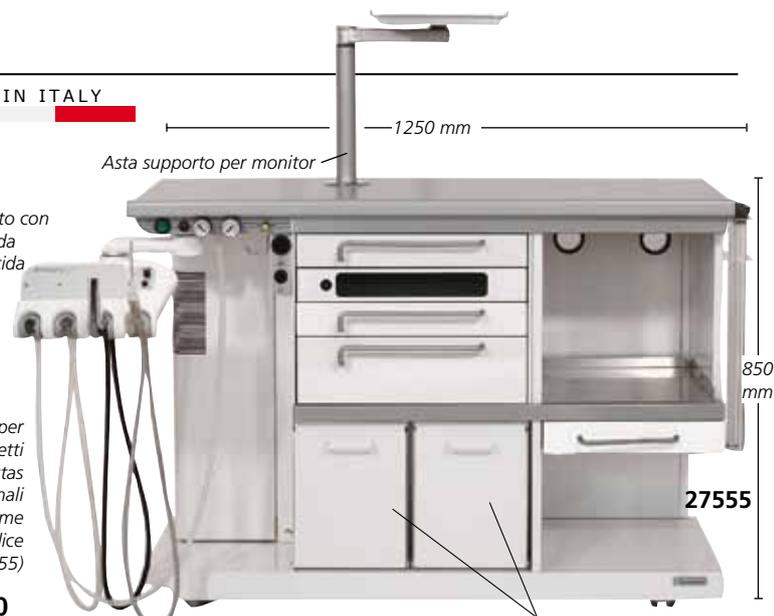

**27555**

- 27554 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL
  - 27555 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL - completo
- Unità Otoplus con colonna per apparecchi diagnostici (fonte di luce, videocamera o stampante) e asta di supporto per monitor. Come codice 27554 ma con cassette vasistas (codice 27541) e supporto per endoscopio (codice 27543) inclusi.

- 27541 CASSETTI VASISTAS - 2 cassette indipendenti
- 27543 SUPPORTO ENDOSCOPI - 2 tubi in plastica trasparenti 1 tubo lungo 50 cm e 1 tubo lungo 25 cm, entrambi chiusi sul fondo.
- 27542 KIT MEDICAMENTI con 1 siringa, 2 nebulizzatori (1 per liquidi e 1 per polveri) e 3 fiale in vetro scuro. Da ordinare con il riunito ORL e installare in fabbrica.
- 28239 FILTRO - ricambio per 27539, 27540, 27554-5
- 27544 FONTE DI LUCE LED

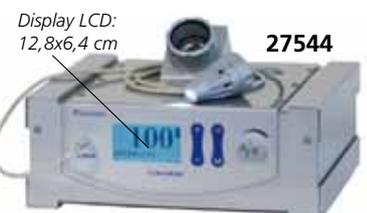

**27544**

Collegabile agli endoscopi senza cavo a fibre ottiche. La maniglia si connette direttamente agli endoscopi rigidi (connessione Storz).

Dimensioni: 30x25x12 cm **166**