

STAZIONE DIAGNOSTICA DA PARETE VISIO 5 PLUS 3,5 V - XENON O LED

STAZIONE DIAGNOSTICA DA PARETE VISIO 5 PLUS 3,5 V

Stazione diagnostica moderna per soddisfare tutte le esigenze mediche e cliniche. Sono disponibili due configurazioni:

- oto-oftalmoscopio con distributore di speculum monouso
- oto-oftalmoscopio con distributore di speculum, termometro, misuratore pressione

Due tecnologie di illuminazione: LED o Xenon-Alogena.

L'uscita regolata prolunga la durata della lampadina e garantisce l'intensità ottimale della luce.

- manici ergonomici anti-scivolo
- trasformatore di uscita costante con protezione incorporata contro sovratensioni
- avvio dolce per introdurre la tensione gradualmente, eliminando lo shock termico durante l'accensione e prolungando la durata della lampadina
- interruttore automatico di accensione-spegnimento quando il manico viene rimosso o reinserto nell'alloggiamento
- intensità della luce regolabile, basso consumo energetico
- controllo preciso della luminosità, tra 3 e 100%
- cavo a spirale lungo 3 metri



DISPONIBILE CON TESTA OFTALMO 5XE E 5GE



7 APERTURE

- Luce piccola ●
- Luce media ●
- Luce grande ●
- Reticolo ☒
- Fessura |
- Mezza luce ◐
- Luce senza rosso** ●
- Luce blu** ●

5XE: 21 APERTURE

5GE: 7 APERTURE

3 filtri

31622-3

31620-1
31624-5

CARATTERISTICHE TECNICHE OFTALMOSCOPI

	31620-1	31624-5	31622-3
Aperture	7	21**	
Lenti focali	28	68	
Intervallo diottrie	-20/+40	-30/+38	

Caratteristiche supplementari di Visio 5XE Plus (31622-3)

- Ottica coassiale per facilitare l'esame delle pupille non dilatate
- Rilevamento delle abrasioni corneali con filtro blu cobalto
- Filtro polarizzante per eliminare virtualmente i riflessi corneali

3 FILTRI**

- Filtro polarizzante ☒
- Luce neutra ○
- Filtro senza rosso ●

**5GE (solo 31620-1 31624-5)

**Combinazione 7 aperture / 3 filtri

Codice GIMA	STAZIONE DIAGNOSTICA VISIO 5 PLUS
31620	Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE Plus* - Xenon
31621	Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE Plus* - LED
31622	Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE Plus** - Xenon
31623	Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5XE Plus* - LED
*Includono trasformatore, 2 manici, testine oto/oftalmo, distributore con 100 speculum monouso grigi (50 Ø 2,5 mm, 50 Ø 4 mm), pannello murale per facilitare montaggio o smontaggio della stazione diagnostica.	
31624	Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE HQ Premier** - Xenon
31625	Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE HQ Premier** - LED
**Come 31620-21 con sfigmomanometro e termometro	
ACCESSORI E RICAMBI	
31428	Lampadina Xenon per oftalmoscopio - ricambio
31544	Lampadina Xenon per otoscopio - ricambio
31485	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - grigio - conf. da 100
31486	Mini speculum monouso Ø 4 mm - grigio - conf. da 100

SET OTO-OFTALMOSCOPI F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V

Set diagnostici professionali caratterizzati da sistemi di illuminazione xenon a fibra ottica da 3,5 V e dotati di reostati per la regolazione dell'intensità della luce. In robusta plastica, con sistema di blocco semplice e durevole. Forniti in valigetta deluxe, necessitano di una base di ricarica (31542) e di una batteria Li-ion ricaricabile (31541). Solo il set 31537 ha collegamento diretto alla rete e necessita della batteria 31547.

- 31535 OTOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
- 31536 OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
- 31537 SET OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V - manico con presa a 2 piedini
- 31538 SET OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
- 31539 SET DIAGNOSTICO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
- 31428 LAMPADINA OFTALMOSCOPIO - ricambio
- 31544 LAMPADINA OTOSCOPIO - ricambio
- 31541 BATTERIA LI-ION RICARICABILE
- 31547 MANICO A BATTERIA LI-ION RICARICABILE 3,5 V per 31537 - ricambio
- 31542 BASE DI RICARICA ZOOM

Fornita con prese: EU a 2 piedini, UK e US.

MINI SPECULUM MONOUSO

Gli otoscopi Visio sono compatibili con gli speculum Gima (31485-8, 31491-2, 31495-9). Vedere pagina 266.

Lente orientabile con ingrandimento 3X per un'immagine chiara e senza riflessi



Illuminazione a F.O. distale con luce LED molto brillante

Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo

Reostato

31535




Luce molto brillante allo xenon

31536

7 aperture:

- Micro spot
- Piccolo
- Grande
- Fissazione
- Fessura
- Filtro verde
- Filtro blu

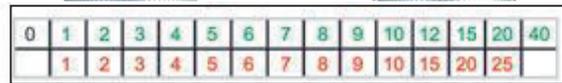

28 lenti con codice colore per un esame perfetto (VERDE per +, ROSSO per -)



Set otoscopio Xenon F.O. 3,5 V 31535

Testina otoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm) lampadina di ricambio, in una valigia rigida

Set oftalmoscopio Xenon F.O. 3,5 V

31536 Testina oftalmoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, lampadina di ricambio, in una valigia rigida.



Set oto-oftalmoscopio Xenon F.O. 3,5 V 31537

Testina otoscopio F.O., testina oftalmoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta e presa, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto da 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadine oto-oftalmo di ricambio, batteria Li-ion ricaricabile 31547, in una valigia rigida.



31538

Set oto/oftalmoscopio Xenon F.O. 3,5 V Testina otoscopio F.O., testina oftalmoscopio F.O., 2 manici batteria con attacco a baionetta, illuminatore nasale con luce F.O., 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadina di ricambio per otoscopio, adatta anche per illuminatore nasale, e lampadina per oftalmoscopio, in una valigia rigida.



31539

Set diagnostico ORL Xenon F.O. 3,5 V Testina otoscopio F.O., testina oftalmoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, illuminatore nasale con luce F.O., illuminatore curvo con lampadina, specchio 20,0 mm, abbassalingua in plastica, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadina di ricambio per oto e oftalmoscopio, in una valigia rigida.