

## SISTEMA D'IRRIGAZIONE OTOCLEAR®

Il kit include:  
1 spray di lavaggio  
20 speculum otoclear  
1 bacinella



25858



• **25858 OTOCLEAR® DISPOSITIVO LAVAGGIO AURICOLARE**  
Dispositivo per lavaggio manuale e ad intermittenza. Fornisce un maggior volume in confronto a siringhe o altri dispositivi manuali. Il design efficiente e pratico consente un utilizzo con entrambe le mani.

MADE IN THE USA

• **25861 SPECULUM D'IRRIGAZIONE OTOCLEAR - monouso - conf. da 40 pz. - ricambio**

Il design a campana protegge contro i rischi di getto troppo forte. Lo speculum dirige i 3 getti d'acqua verso le pareti del canale uditivo, lontano dalla membrana timpanica, producendo così un lavaggio forte che rimuove efficacemente il cerume. La parte di uscita controlla i getti di ritorno e dirige lo scolo verso la bacinella.


• **25862 BACINELLE - conf. da 3 - ricambio**



Termometro per la temperatura dell'acqua



Confort del paziente migliorato grazie al design "gentle touch"

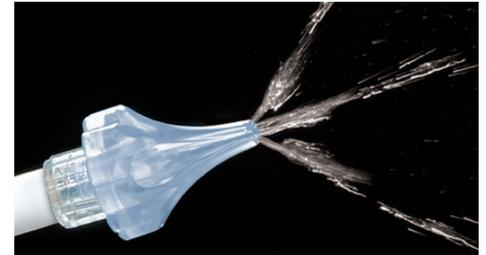

Azione brevettata a 3 getti

## CURETTE AURICOLARI GIMA

• **31470 CURETTE AURICOLARI GIMA - confezione da 10**  
Curette doppio uso: un lato a forma di cucchiaio, l'altro a forma di ansa. Ogni currette è confezionata in un sacchetto individuale.

31470



Lato cucchiaio

Lato ansa

## CURETTE AURICOLARI BIONIX

**FLEXLOOP:**  
Ansa da 4 mm per procedure di pulizia normali, molto flessibile e poco traumatica




**MICROLOOP:**  
Perfetto per cerume impattato, grazie alla sua costituzione più rigida, testa da 3 mm



**INFANTSCOOP:**  
Ideale per orecchie piccole, può essere utilizzato attraverso un otoscopio, testa arrotondata da 2 mm.



**CERASPOON:**  
Appositamente studiato per cerume viscoso, quando si richiede uno strumento con testa larga 4 mm

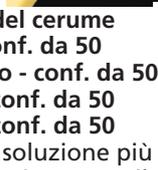

Sistema completo di gestione del cerume

- **31462 FLEXLOOP - bianco - conf. da 50**
- **31464 INFANTSCOOP - azzurro - conf. da 50**
- **31460 MICROLOOP - verde - conf. da 50**
- **31467 CERASPOON - giallo - conf. da 50**

I quattro tipi di curette sono la soluzione più efficace, economica e sicura per rimuovere il cerume da qualsiasi orecchio e qualsiasi consistenza della massa di cerume.

**Confort paziente:** le curette in metallo sono fredde, rigide ed affilate. Le curette BIONIX con estremità arrotondate in plastica riducono i traumi e i rischi di lacerazione. Latex free.

**Efficacia:** le curette BIONIX presentano un'efficacia doppia rispetto ai presidi in metallo in quasi ogni situazione e la loro struttura in polipropilene le rende virtualmente indistruttibili.

**Monouso:** le curette non richiedono costosi e lenti processi di sterilizzazione ed eliminano il rischio di contaminazione.



MADE IN THE USA



## CURETTE ILLUMINATE BIONIX

• **31450 KIT MISTO CURETTE ILLUMINATE**  
Composto da 50 diverse curette illuminate (8 FlexLoop e 7 per ciascuno degli altri modelli raffigurati sotto) + illuminatore a LED + lente



MicroLoop®  
Ansa Ø 3 mm



FlexLoop®  
Estremità Ø 4 mm



InfantScoop®  
Estremità Ø 2 mm



AngleLoop®  
Ansa angolata Ø 4 mm



WaveCurette™  
Estremità ondulata Ø 2,5 mm



VersaLoop®  
Larg. estremità 3 mm



CeraSpoon®  
Larg. estremità 4 mm

MADE IN THE USA




- **31461 KIT MICROLOOP**
- **31463 KIT FLEXLOOP**
- **31465 KIT INFANTSCOOP**
- **31466 KIT ANGLELOOP**
- **31468 KIT VERSALOOP**

Ogni kit è composto da 50 curette + illuminatore a LED + lente

- **31458 KIT PINZETTE ILLUMINATE - scatola da 10 pinzette + lente + illuminatore a LED**
- **31459 CURETTE ARTICOLATE ILLUMINATE - scatola da 25 curette + lente + illuminatore a LED**



Pinzetta luminosa a LED per rimozione dei corpi estranei

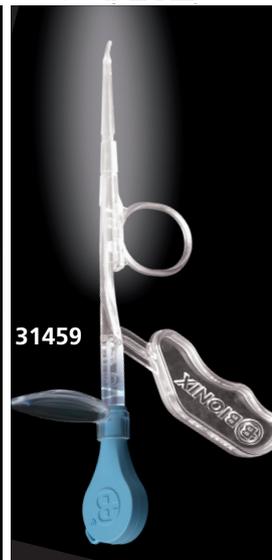

Curette luminosa a LED con estremità di 3 mm

L'estremità ha un raggio di movimento a 90° per facilitare la rimozione del cerume dal canale uditivo

