

D-351: TERMOSALDATRICE ELETTRIMAGNETICA

CONFORME A
DIN 58953 P.7



Chiusura elettromagnetica

MADE IN ITALY



• 35900 TERMOSALDATRICE D-351

Termosaldatrice compatta, progettata per essere utilizzata in medicina, odontoiatria, ambulatori oculistica e laboratori analisi.

Caratteristiche: lunghezza saldatura e taglio 35 cm - Controllo

di sicurezza con allarme. Scheda principale con controllo della temperatura. Chiusura elettromagnetica della barra saldante completa di bobina e di tagliatore.

Facile da usare: chiusura barre con la sola pressione di un dito. L'elettromagnete mantiene la pressione di saldatura costante per il tempo impostato. Apertura automatica a fine ciclo.

Rapida: chiusura elettromagnetica. L'operatore non incontra difficoltà per l'avanzamento manuale del tubolare

Sicura: le barre saldanti non si chiudono se fra queste si trova un oggetto di spessore superiore ai 3 mm.

Controllo elettronico di temperatura con sonda NTC.

La funzione di allarme elettronico evita il surriscaldamento

- 35902 TEFLON - ricambio
- 35903 RESISTENZA - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza - larghezza saldatura: 350 mm - 8 mm secondo norme DIN 58953 - 7:2010
 Tempo di saldatura controllato elettronicamente: 0,5 sec.
 Massima larghezza bobina: 350 mm Lunghezza taglio: 350 mm
 Materiale saldato: carta-polietilene-poliestere
 Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz monofase
 Assorbimento: 900 W in fase saldatura
 Dimensioni: 44x17,5xh 31 cm Peso: 18 kg

TERMOSALDATRICE EVO GD-301 PER SALDATURE A CALORE CONTINUO

MADE IN ITALY



35929

CARATTERISTICHE TECNICHE

Saldatura 12 mm Lunghezza saldatura 300 mm
 Saldatura a calore continuo termocontrollato
 Tagliatore incorporato Temperatura e tempo di saldatura fissi
 Azionamento manuale Alimentazione 230 V / 50 / 60 Hz monofase
 Assorbimento: 900 W Grado di protezione IP 20
 Dim. saldatrice 452x248x146 mm Dim. porta rotoli 458x412x242 mm

- 35928 EVO GD-301 TERMOSALDATRICE - solo macchina

- 35929 EVO GD-301 TERMOSALDATRICE - completa

Termosaldatrice manuale per la saldatura di buste e rotoli medicali a norme DIN 58953-7:2008. **3 elementi riscaldanti in ceramica** per una saldatura più rapida e accurata e un **sistema di entrata e uscita migliorata** per mantenere la pellicola piatta ed evitare che si muova eccessivamente all'interno della macchina. Disponibile in due versioni: compatta senza accessori (35928) o con porta rotolo, taglierina e piano di lavoro (35929). Di dimensioni estremamente ridotte si adatta perfettamente all'utilizzo in studi dentistici, medici e veterinari. Barra saldante da 300 mm azionata da una leva manuale. Saldatura a calore continuo termocontrollato. Design verticale per ridurre gli ingombri. Integrata con un porta rotoli removibile che può essere posizionato anche separatamente alla saldatrice. Utilizzabile soltanto con laminati di carta PP medicale e/o buste di plastica indicate per la sterilizzazione al vapore.

- 35933 ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA - ricambio
- 35935 LAME - kit da 5 - ricambio



35928

TRACCIABILITÀ/DOCUMENTAZIONE: ETICHETTATRICE A 2 LINEE

TRACCIABILITÀ/DOCUMENTAZIONE

Il sistema di tracciabilità degli strumenti consente una gestione corretta e semplice dei materiali sterilizzati, dalla preparazione alla sterilizzazione e all'uso finale. L'uso combinato dell'etichettatrice e delle etichette fornisce un sistema di dati completo essenziale per tutelare operatori e strutture sanitarie.

- etichette identiche facilmente stampabili
- evita errori nei numeri di lotto
- facile interpretazione dei risultati (cambiamento di colore preciso)
- con le etichette con indicatore, non servono altri indicatori di processo

• 35980 ETICHETTATRICE MEDICA A 2 LINEE 14+14 CIFRE


Affidabile, facile da utilizzare e durevole, per anni di uso intensivo. Stampa sulle etichette tutte le informazioni necessarie: numero lotto, numero sterilizzatore/ciclo, data sterilizzazione e data scadenza.

• 35984 ETICHETTA VAPORE 2 LINEE - conf. da 12.000 (24 rotoli da 500 etichette)

La prima linea di stampa visualizza 3 caratteri alfabetici + 11 numeri, la seconda 14 numeri. Etichetta indicatore di vapore, idonea per sterilizzazione a vapore. Doppio supporto adesivo. Dopo il ciclo di sterilizzazione, l'indicatore passa da ROSA a MARRONE. Indicatore di processo: Standard Vapore ISO 11140-1. Classe 1, inchiostro non tossico, senza lattice.

• 35982 ROTOLO INCHIOSTRO PER ETICHETTATRICE - conf. da 5

35982

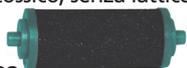

35980

MADE IN ITALY



Fornita con manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RO) e 1 rotolo di inchiostro.

35984

PRIMA DELLA STERILIZZAZIONE

Numero lotto	STE05	14587
Data sterilizzazione	21.10.19	21.10.20

DOPO LA STERILIZZAZIONE

N. sterilizzatore/ciclo	STE05	14587
Data scadenza	21.10.19	21.10.20

È indicato un uso preferito della prima linea di stampa, ma l'utente può stampare altre informazioni