

TEST INFLUENZA A/B

• 24537 TEST INFLUENZA A/B - conf. da 30 test (3 buste da 10 pz.)

Il test in vitro per l'influenza A/B è in grado di rilevare gli antigeni del virus di tipo A e B (nucleoproteine) prelevati da campioni respiratori. Il test è progettato per rilevare i vari sottotipi dell'influenza A (H1N1, H3N2, H5N1, H5N3, H7N3, H9N2).

Si esegue mediante l'utilizzo di tamponi sterili nasali che consentono il prelievo dei campioni respiratori necessari. Di facile utilizzo con risultati in 10-15 minuti. Include dispositivo per il test rapido, tampone, provetta, reagente.



PROFESSIONALE

24537



PROFESSIONALE

24526



HELICOBACTER PYLORI - TEST PER LA RILEVAZIONE DELL'ULCERA

• 24526 HELICOBACTER PYLORI TEST - scatola da 40 test


Test rapido per rilevazione qualitativa di anticorpi Helicobacter Pylori nel sangue umano intero, siero o plasma. Facile da eseguire ed interpretare. Risultati rapidi in 10 minuti. Include

40 test a cassetta, 40 contagocce, 1 tampone. Scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, HU. Sensibilità relativa: 96.8%; specificità relativa: 93.0% e accuratezza: 94.6%.

• 24524 AUTOTEST HELICOBACTER PYLORI - conf. da 1

Test rapido per la rilevazione qualitativa degli antigeni dell'Helicobacter Pylori in campioni di feci umane. Risultati disponibili in 10 minuti. Confezionato in scatola comprendente cassetta test, tubo prelievo campioni

con tampone di estrazione, carta di raccolta delle feci e manuale d'uso in GB, IT, ES, PT, DE, NL, PL. Sensibilità relativa: 97,6%; specificità relativa: 97,9%; accuratezza: 97,8%.

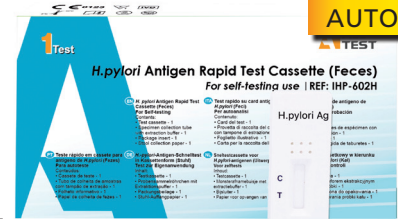

AUTOTEST

0123

24524




CONTROLLO PROSTATA - TEST RAPIDO PSA

• 24533 TEST PSA - conf. da 25 test - per uso professionale

L'analisi del PSA è un test rapido a cassetta per il rilevamento semiquantitativo dell'antigene prostatico specifico, che si avvale di una combinazione di oro colloidale ed anticorpi anti-PSA. Fornisce risultati accurati in 5 minuti.

- sensibilità, specificità e precisione 99%
- rileva il PSA nel sangue intero, nel siero o nel plasma
- cut off: 3 ng/ml.

I test sono forniti con contagocce, reagente, istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES).

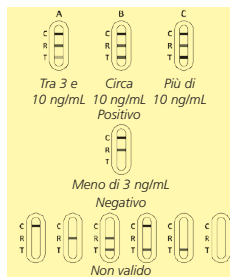

PSA

24533

PROFESSIONALE

MARKER CARDIACO

• 24525 MARKER CARDIACO - 3 parametri:

Mioglobina, Troponina, CK-MB - conf. da 20 test

Permette di diagnosticare in soli 15 minuti l'infarto miocardico acuto. Ideale per il monitoraggio di pazienti affetti da cardiopatie o dopo infarti o interventi chirurgici. L'infarto miocardico acuto (attacco cardiaco) è responsabile di 1 decesso su 5 negli USA; è necessario intervenire entro 6 ore per evitare il deperimento irreversibile e permanente del muscolo cardiaco. Questo dimostra l'importanza di una diagnosi precoce e accurata. L'ECG è il metodo di diagnosi di infarto

miocardico più utilizzato. Sfortunatamente però il 25% dei pazienti soggetti a infarto miocardico acuto presenta un ECG normale. GIMA offre un test di diagnosi combinata dei 3 più importanti parametri cardiaci: Mioglobina, Troponina, CK-MB. Include 20 cassette, 20 contagocce e 1 diluente. Misurazione nel plasma, siero o sangue intero. Manuale multilingue: (GB, FR, IT, ES). Per uso professionale.



PROFESSIONALE


TEST CRP - PROTEINA C REATTIVA

• 24527 TEST PROTEINA C REATTIVA - CRP - conf. da 20 test

La misurazione della CRP nel sangue intero, siero o plasma ha 2 scopi:
- il livello di hs-CRP aiuta a valutare il rischio cardiovascolare e i disturbi al sistema vascolare periferico. Valori elevati di hs-CRP indicano un rischio maggiore di malattia cardiovascolare.

- il livello di CRP consente di identificare e tenere traccia di infezioni e malattie che causano infiammazioni (linfoma, lupus, arterite a cellule giganti, osteomielite, artrite reumatoide ecc.)

Utilizzabile su sangue intero o siero/plasma. Risultati in 7 minuti, bande di risultato di colore intenso, banda di controllo di corretta esecuzione del test
- si conservano a temperatura ambiente. Include 20 cassette con contagocce. Per uso professionale.

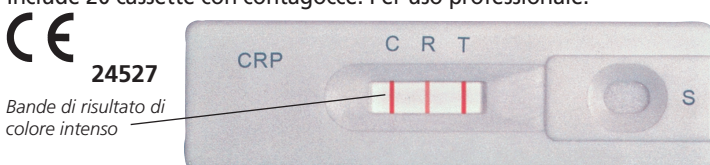

24527

Bande di risultato di colore intenso

TEST MALARIA RAPIDO


• 24547 TEST MALARIA P.F. - confezione da 40 test

Il test malaria è un veloce esame cromatografico immunologico per la rilevazione qualitativa del plasmodium falciparum nel sangue intero.

Il test è stato confrontato con i metodi tradizionali di analisi microscopiche delle macchie di sangue, la correlazione tra i due sistemi è superiore al 99,0%. Il kit include test a cassetta, reagente, dosatore monouso e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES). Le lancette non sono incluse. Per uso professionale.

24547

Malaria P.f.

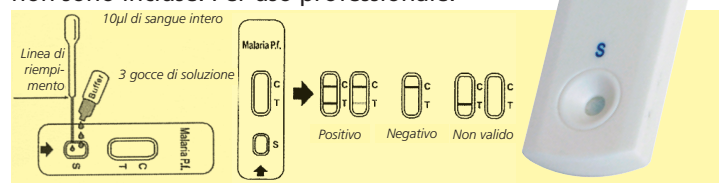

ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi