


A4

物料编码: 10089911

产品名称、型号根据实际生产打印

生产日期、使用期限、批次代码、根据实际生产打印

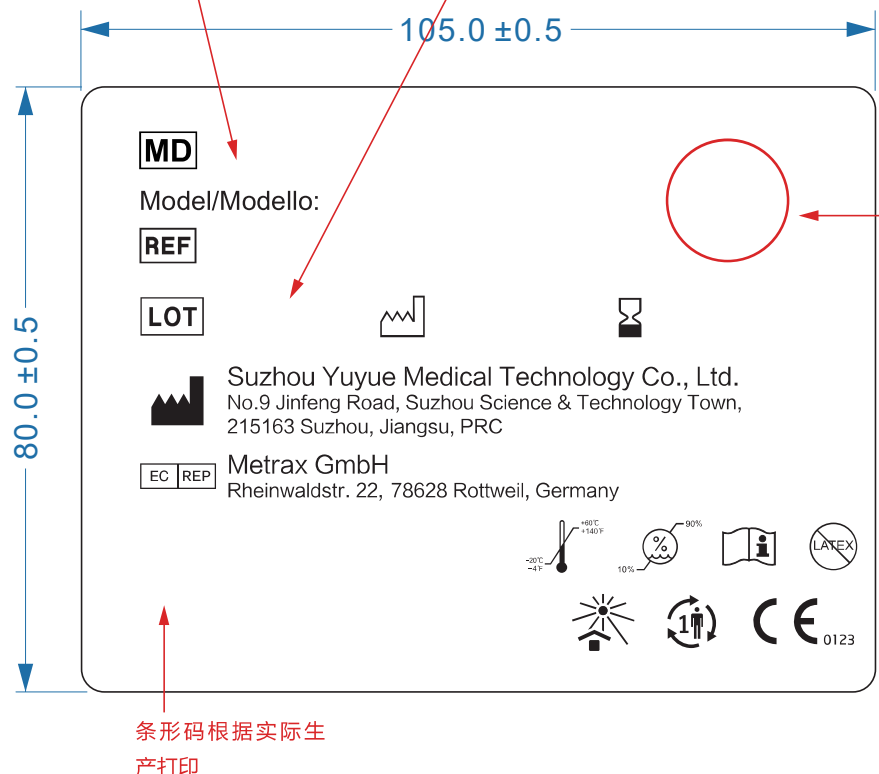

工厂打印标签示意图



技术要求:

- 印刷内容以电子矢量图档为准;
- 标签打印清晰、无缺印、重印,切边整齐完整;
- 产品名称:根据实际生产填写,
口罩 (YF/RT系列) 填写: Full Face Mask,
鼻罩 (YN系列) 填写: Nasal Mask
鼻枕面罩 (YP系列) 填写: Nasal pillows Mask
- 型号:根据实际生产打印产品型号,注明示例:YP-01;
- 规格:根据实际需求打印产品规格
L\M\S(规格外的△和L\M\S一起打印),组合销售的YP不打印规格。
- 处为生产批次,注明示例: 1231008
生产批次为2023年10月第八批次;
- ☞处为生产日期,根据实际生产填写。
- ☎处为使用期限,使用期限为5年,注明示例:
注明示例:2023-10-15,使用期限为2023年10月15日(对应的生产日期为2023年10月16日)

9. UDI和REF号详见面罩REF清单

10. 标签跳距2.5mm,左右留边各2.5mm,公差为2.5mm+0.5mm/-0mm。

标记	处数	更改文件号	签字	日期	
设计			视角	☞☎	
制图			工艺		
审核			版本	A	
批准			日期		

面罩产品标签-英意双语-A

PET+可打印哑膜

YY05-C-B28

图样标记	数量	重量	比例
S			1:1

共 2 张 第 1 张

yuwell 鱼跃
让科技律动生命
苏州鱼跃医疗科技有限公司