

# PRIMALED

SERIE OSSERVA



RIMSA

Diamo luce alle idee



[www.rimsa.it](http://www.rimsa.it)

## LAMPADA MODELLO PRIMALED

Dal design accattivante PRIMALED è un concentrato di tecnologia con prestazioni ineguagliabili, il meglio per una lampada da osservazione. È composta da 9 ottiche a Leds suddivise in due circuiti separati 6+3. L'ottica della lampada è stata progettata per garantire un'illuminazione focalizzata e di profondità. Il diametro del campo illuminato è di 14 cm @ 0,50 m. Il sistema di bilanciamento Ergo\_Spring conferisce a PRIMALED maneggevolezza e stabilità.

La disposizione radiale delle ottiche e il grande diametro del riflettore (195mm) consentono la soppressione delle ombre ed una illuminazione tridimensionale.

---

**Design:** la forma circolare e ultrapiatta del riflettore rende il prodotto ergonomico e idoneo per ogni tipo di installazione, dall'ambulatorio al reparto di terapia intensiva.

**Selezione del colore:** PRIMALED, pioniera del cambio colore con Led a luce bianca, è equipaggiata con selettore di temperatura di colore (4500-5000Kelvin). Il cambio di colore avviene con l'utilizzo di soli Leds monocromatici per evitare scomposizioni di colore sulla zona da osservare.

**Courtesy\_light:** La prima e l'unica lampada da esame con incorporata la possibilità di scegliere una luce ambientale oltre alla tradizionale luce concentrata. Selezionando l'apposito tasto si attiva questa funzione.

**Impugnatura sterilizzabile:** la prima lampada da esame ad essere equipaggiata con una impugnatura rimovibile adatta per essere sterilizzata. PRIMALED considera molto importante l'asepsi.


## PRESTAZIONI

|                                                          |     |             |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Illuminamento (Ec) a 0,50 m                              | Klx | 105         |
| Temperatura di colore                                    | K   | 4000 – 4500 |
| Indice di resa cromatica (CRI)                           | Ra  | 95          |
| R9                                                       |     | ≥90         |
| d10 diametro del campo luminoso raggiunto al 10% dell'Ec | mm  | 160         |
| Diametro del campo luminoso                              | mm  | 160         |

## DATI ELETTRICI


|                                      |       |           |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| Tensione alternata primaria (V a.c.) | V     | 100 – 240 |
| Frequenza                            | Hz    | 50/60     |
| Potenza assorbita                    | W     | 10        |
| Diametro del riflettore              | Cm    | 19,50     |
| No. di LED                           | Led   | 9         |
| Durata della fonte luminosa          | hours | ≥60.000   |

## VERSIONI DISPONIBILI:

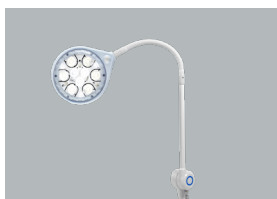

-BRACCIO FLESSIBILE

(codice **PRIMA-FLEX**)

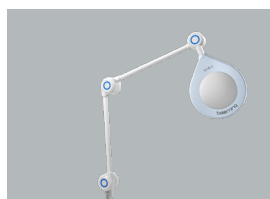

-BRACCIO A SNODO



(codice **PRIMA-FIX**)

## SISTEMI DI FISSAGGIO DISPONIBILI:

- MORSETTO TAVOLO S11
- MORSETTO PARETE S12MED
- PIANTANA RLBI
- MORSETTO RAIL Z400819



# PRIMA-FIX

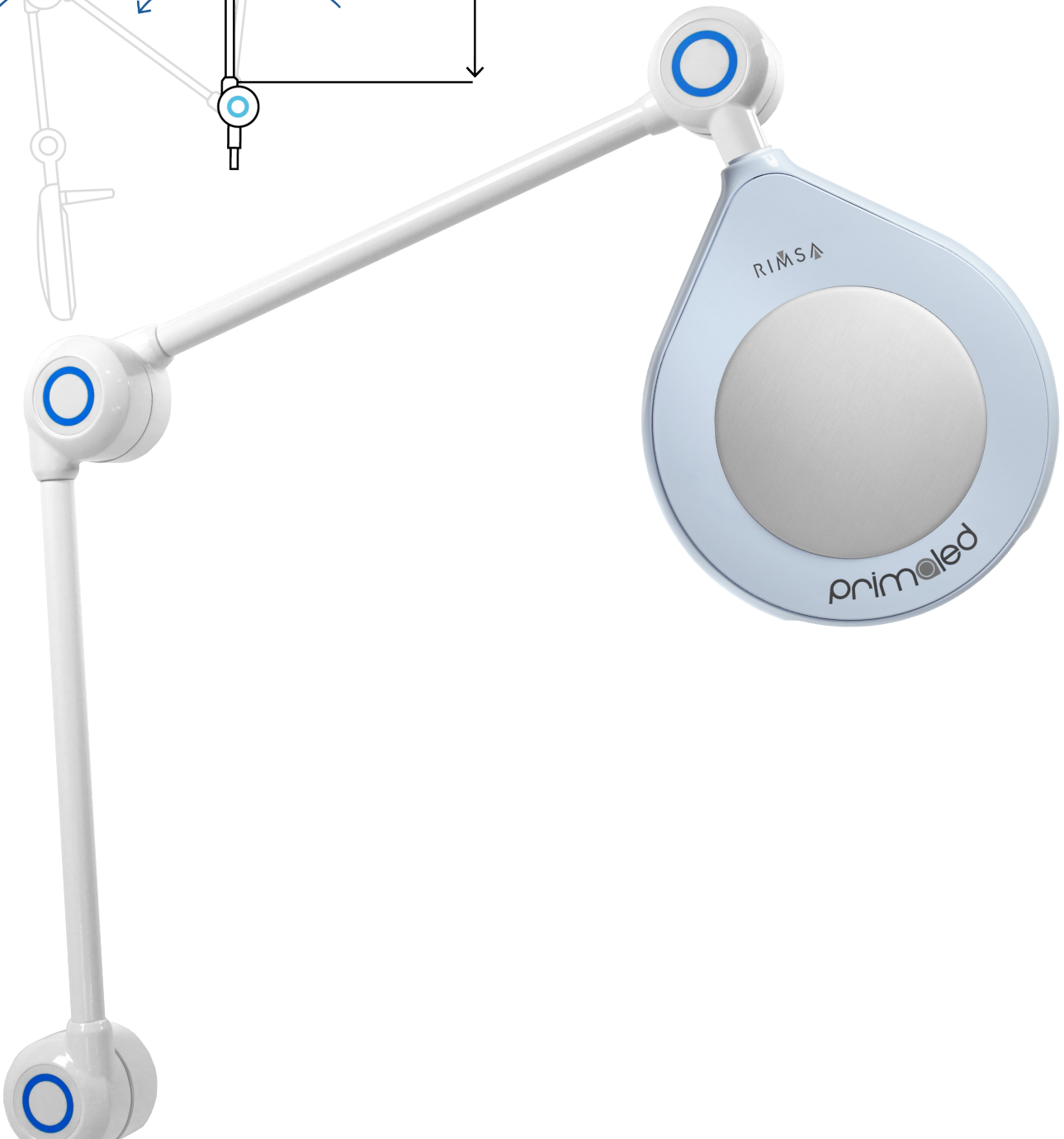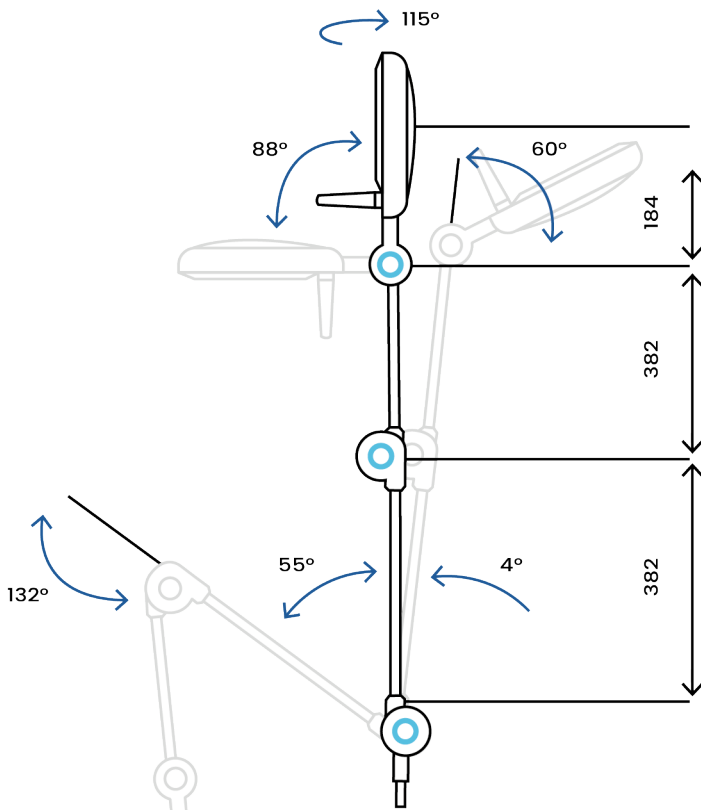

Via Monterosa, 18 / 22 - 20831 Seregno (MB) - Italia  
Ph. (+39) **0362 325709** | Fax (+39) **0362 328559** | E-mail **info@rimsa.it**  
**www.rimsa.it**

Rimsa si riserva il diritto di migliorare i prodotti in catalogo senza alcun preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale.



Ricerca & componenti  
MADE IN ITALY



Diamo luce alle idee



[www.rimsa.it](http://www.rimsa.it)